

# WIDEX MENU™5 AUDÍFONO RETROAURICULAR POTENTE




La nueva solución flexible de 5 canales de Widex.

La plataforma Flex le permite configurar el audífono MENU para que se adapte a la pérdida auditiva del cliente.

Funciones opcionales para un mejor rendimiento y sonido.

Para pérdidas auditivas de moderadas a severas y profundas.

## RANGO DE ADAPTACIÓN RECOMENDADO

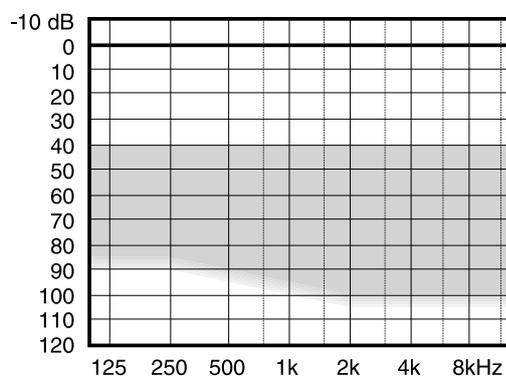

- 5 canales
- Plataforma Flex

### PAQUETE BÁSICO

- Compresión de niveles altos/EDRC
- Control Automático de Salida
- Estabilizadores del sonido
- Reducción del ruido SIS
- Micrófonos direccionales omni/dir
- Cancelación multidireccional activa de feedback
- Algoritmo pediátrico
- SmartTone
- Localizador HD con Trazador del habla
- Extensor de audibilidad™
- Hasta 3 canales de escucha
- Compatible con FM/DAI
- Bobina inductiva ajustable en ganancia
- Control de volumen
- Codo pediátrico
- Pila Nº 13

### OPCIONAL/SOLO EN ALGUNOS MERCADOS


- Enfatizador del habla
- Diario de sonido
- SmartSpeak™
- Zen
- T-DEX
- Control remoto

# ME5-19

## SALIDA MAX.; SIMULADOR DE OÍDO

IEC 60118-0


Output dB SPL

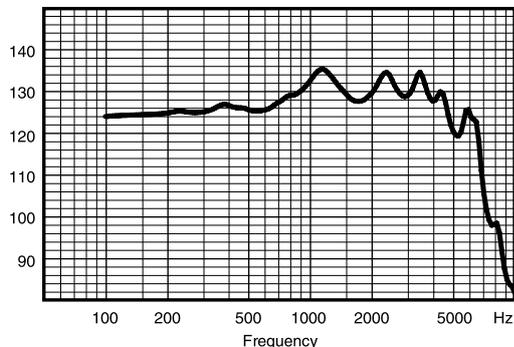

## SALIDA MAX.; ACOPLADOR DE 2CC

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009


Output dB SPL

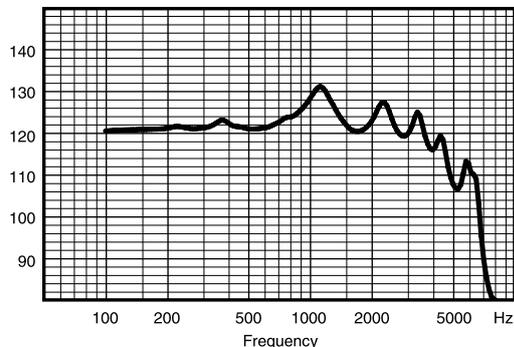

## SALIDA, SIMULADOR DE OÍDO

IEC 60118-0


Output dB SPL

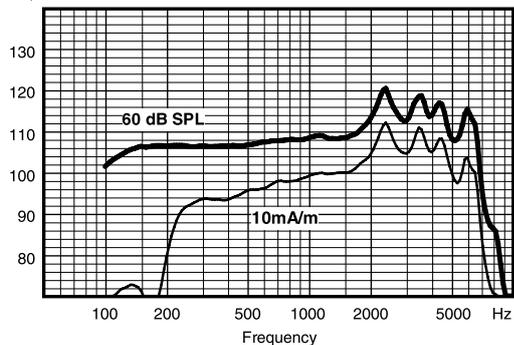

## SALIDA, ACOPLADOR DE 2CC

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009

Output dB SPL

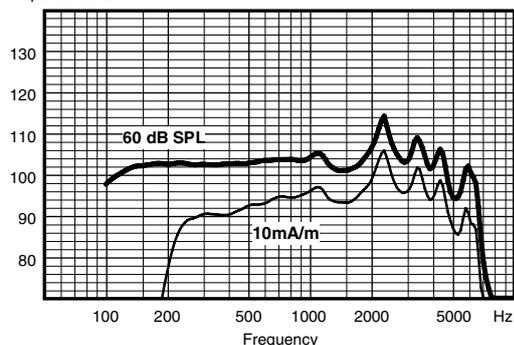

### Datos típicos

Obtenidos durante un procedimiento de medición estándar con tonos puros.  
Audífono en Modo de test 1 de Compass, de no ser así, se indicará.  
Medidos con un codo normal y un acoplador BTE estándar.

		IEC 60118-0	ANSI S3.22-2009 / IEC 60118-7
OSPL90	2500 Hz	133 dB SPL	124 dB SPL
	Pico	136 dB SPL	131 dB SPL
	Promedio	129 dB SPL	124 dB SPL
Salida acústica (entrada 60 dB SPL)	2500 Hz	118 dB SPL	108 dB SPL
	Pico	121 dB SPL	115 dB SPL
	Promedio	110 dB SPL	105 dB SPL
Ganancia max. (entrada 50 dB SPL, Modo de test ganancia max de Compass)	2500 Hz	69 dB	59 dB
	Pico	75 dB	70 dB
	Promedio	65 dB	59 dB
Salida de bobina inductiva (entrada 10 mA/m)	2500 Hz	110 dB SPL	100 dB SPL
	Pico	113 dB SPL	106 dB SPL
	Promedio	100 dB SPL	97 dB SPL
Rango de frecuencia		100 Hz - 7100 Hz	100 Hz - 6850 Hz
Distorsión armónica (entrada 70 dB de SPL)	500 Hz	2,2%	2,1%
	800 Hz	0,7%	0,5%
	1600 Hz	0,2%	0,1%
Ruido de entrada equivalente		19 dB SPL	22 dB SPL
Consumo de pila (en reposo)		0,8 mA	0,8 mA
Consumo de pila		0,8 mA	0,85 mA
Vida útil de la pila, tipo de pila 13 Zn-Air (270 mAh)		330 (>265)	325 (>260)
Inmunidad a teléfonos móviles		IRIL: -11/-10 dB SPL	U-rating: M3/T3

