

WIDEX MENU™



WIDEX®

TODOS PUEDEN TENERLO

CAPITAL FEDERAL: Tucumán 1321 4º Piso 1º Tel./Fax: (54 11) 4375-6522 / 4524
SUCURSAL CORDOBA: Av. H. Yrigoyen 146 4º Piso Of. 1 Tel./Fax: (0351) 425-5416/422-9274
SUCURSAL ROSARIO: Santa Fe 1353, 8º Piso Tel./Fax: (0341) 445-0627/0966
SUCURSAL RAMOS MEJIA: Rosales 71 Tel.: (54 11) 4469 0703
SUCURSAL LOMAS DE ZAMPORA: Lomada 516
RED DE DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS
www.widex.com.ar | info@widex.com.ar



Cuando elige los audífonos Widex, se eligen los productos de una empresa que ha recibido la certificación Wind Made. Wind Made es la primera etiqueta para el consumidor que identifica a las empresas que utilizan energía eólica.

LA ELECCION ES SUYA

IMAGINE SI LE PUDIERA OFRECER A SUS PACIENTES UN **AUDÍFONO BÁSICO** QUE NO SÓLO SUENE BIEN, SINO QUE ADEMÁS SE PUEDA **ADAPTAR EN SUS FUNCIONES** A LAS DIFERENTES **PÉRDIDAS AUDITIVAS** Y **ESTILOS DE VIDA**.

LA NUEVA **SOLUCIÓN AUDITIVA** DE WIDEX LO LOGRA.



MENU

CARACTERÍSTICAS GENERALES

	ME-19	ME-9	ME-M	ME-X	ME-CIC
ESTILO	Retroaural	Retroaural	Micro Retroaural	Intracanal	CIC



Opción tubo fino	NO	SI	SI	No	No
Tipo de pila	13	13	13	312	10
Duración de la pila	>265 horas	>260 horas	>90 horas	>135 horas	>100 horas
CONTROLES					
Control de volumen	SI	SI	NO	SI	NO
Botón de programas	SI	SI	SI	SI	NO
Bobina inductiva	SI	SI	NO	SI	NO
FM compatible	SI	SI	NO	NO	NO
ACCESORIOS					
RC4	SI	SI	SI	SI	SI
			021 030 071 072 073 081	Beige	Rojo / Azul
DETALLES TÉCNICOS					
Canales	3 - 5 - 10	3 - 5 - 10	3 - 5 - 10	3 - 5 - 10	3 - 5 - 10
Ganancia máxima	75 dB	65 dB	67 dB	67 dB	61 dB
Salida máxima	136 dB	131 dB	132 dB	125 dB	123 dB
Ancho de banda	7100 Hz	7500Hz	8100 Hz	8600 Hz	9750 Hz
Rango de adaptación	Moderado a severo	Leve a severo	Leve a moderadamente severo	Leve a moderadamente severo	Leve a moderadamente severo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los audífonos MENU ya sean de 3, 5 ó 10 canales presentan las siguientes funciones básicas y accesorias.

	FUNCIÓN BÁSICA	FUNCIÓN ACCESORIA
ESCUCHA EN SILENCIO		
Compresión de Alto Nivel (HLC)	SI	
Control automático de salida	SI	
Estabilizador de sonido	SI	
ESCUCHA EN RUIDO		
Reductor de ruido SIS	SI	
Micrófonos direccionales fijos y omnidireccionales	SI	
Localizador de Alta Definición con Trazador de Habla		SI
COMFORT DE USO		
Cancelador Multidireccional Activo de Feedback	SI	
AISA	SI	
CONTROLES PARA EL USUARIO		
Smart Tone	SI	
Programas de escucha	2	
Zen*		SI
RC4		SI
ADAPTACIÓN Y CALIBRACIÓN FINA		
Sensograma básico	SI	
Sensograma extendido	SI	
Efecto de la ventilación in situ	SI	
Gestor de Oclusión	SI	
PROGRAMACIÓN		
NOAHLINK	SI	
IPS	SI	
HI-PRO	SI	

*Zen no disponible en IPS

FUNCIONES ACCESORIAS

Entre las funciones accesorias que se le pueden agregar al MENU básico se encuentran:



LOCALIZADOR DE ALTA DEFINICIÓN CON TRAZADOR DE HABLA

Este sistema de micrófonos direccionales ayuda a la reducción de ruido y permite discriminar el habla proveniente de varias direcciones; el Localizador de Alta Definición es completamente adaptativo por lo que produce la mejor relación señal ruido para cada ambiente de sonido.




ZEN


El conocido programa de música zen y ruido creado por Widex no sólo ayuda al usuario a relajarse sino que se ha probado su ayuda con los efectos del zumbido.




RANGO DE ADAPTACION

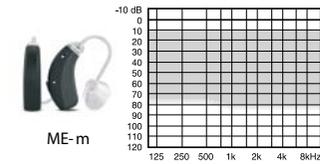


Pérdida auditiva leve a moderadamente severa

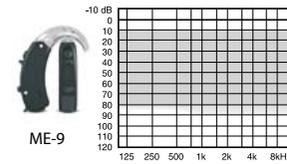


Pérdida auditiva leve a severa

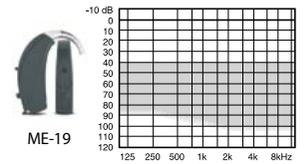

Pérdida auditiva moderada a severa

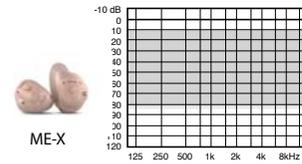

Pérdida auditiva leve a moderadamente severa

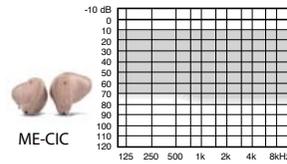

Pérdida auditiva leve a moderadamente severa

OPCIONES DE TIPS INSTANTANEOS PARA LOS MODELOS micro y 9



Tip abierto instantáneo



Tulipa instantánea



Doble tulipa instantánea

COLORES



Beige cálido (021)



Negro azabache (030)



Marrón cappuccino (071)



Plateado invernal (072)



Gris titanio (073)



Gris carbón (035)



Beige claro (025)



Marrón oscuro (027)



Marrón arcilla (028)



Dorado seda (081)