

WIDEX UNIQUE™ AUDÍFONO RIC CON AURICULAR P

NIVEL DE RENDIMIENTO **UNIQUE 100**




El audífono RIC WIDEX UNIQUE está basado en la nueva plataforma WIDEX U con Tecnología Sound Class para una clasificación automática de los entornos sonoros y un procesamiento del sonido óptimo determinado por las clases de sonido.

Conectividad inalámbrica mediante nuestra tecnología WidexLink y compatible con nuestras ayudas auditivas DEX.

Pila del tipo 312.

Pérdidas auditivas de moderadas a severas y profundas.

RANGO DE AJUSTE SUGERIDO

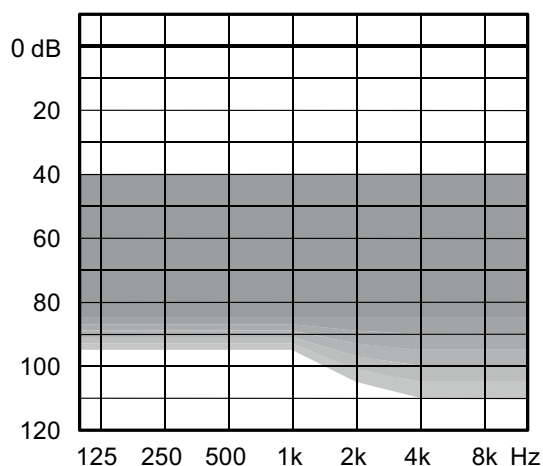

TECNOLOGÍA ESTÁNDAR

- Plataforma U con tecnología Sound Class
- WidexLink, conectividad inalámbrica
- Funcionalidad InterAural
- Múltiples opciones de juego adaptador de oído
- Tecnología Power Saver III consumo bajo de pila

PRESTACIONES PRINCIPALES	100
Canales de procesado	4

CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD INALÁMBRICA

Aplicación para iPhone, Android y nuevas funcionalidades	x Vía COM-DEX
Compatibles con WidexLink	x
Ayudas auditivas DEX (con WidexLink)	CALL-DEX, UNI-DEX, COM-DEX, TV-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, PHONE-DEX

PRESTACIONES EXCLUSIVAS

PRESTACIONES	100
Plataforma U	•
Potenciador de alta frecuencia	
Botoón Pulsador*	U
Reducción del ruido del viento	
Modo Enfoque	•
Pabellón digital	
Reducción del ruido de bajo nivel	
Suavizador TruSound	
Enfatizador de habla RT	
Reducción de ruido	•
Tecnología Sound Class	1
Localizador HD	Banda ancha
Programas	3
Canales de procesado y reajuste	4
ZEN	•
Extensor de audibilidad	
Velocidad de compresión variable	Clásica

* Programable: Control de preferencia, cambio de programa o una combinación de ambos


Grado de protección IP58

U-FS P

SALIDA MÁXIMA; SIMULADOR DE OÍDO

IEC 60118-0


Output dB SPL

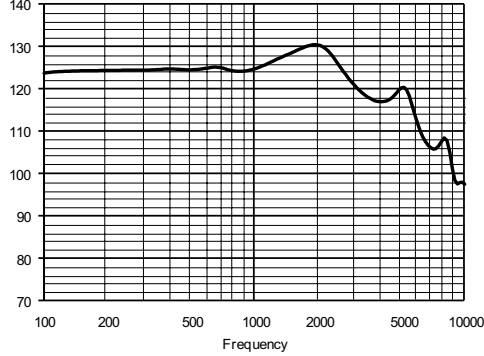

SALIDA MÁXIMA; ACOPLADOR DE 2 CC

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009


Output dB SPL

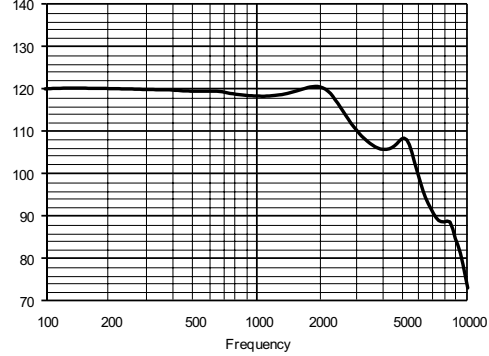

SALIDA; SIMULADOR DE OÍDO

IEC 60118-0


Output dB SPL

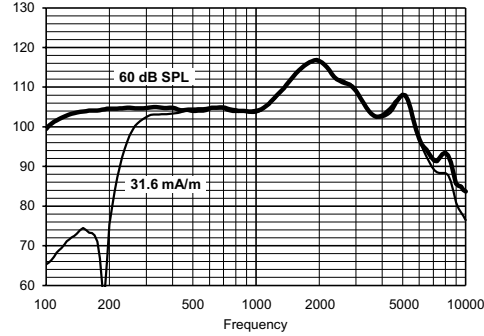

SALIDA; ACOPLADOR DE 2 CC

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009

Output dB SPL

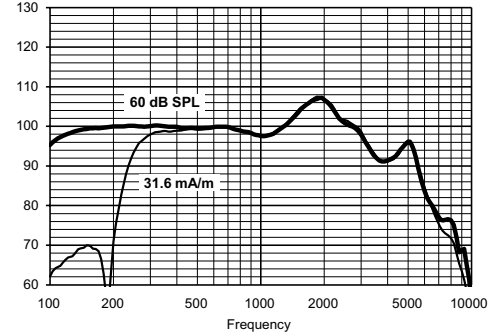

Datos técnicos

Obtenidos durante un procedimiento de medición estándar con tonos puros. Audífono en Modo de ganancia de test de referencia de Compass. De no ser así, se indicará. Medido con un acoplador intracanal estándar sin filtro anticerumen. Para más información, visite global.widex.com.

		IEC 60118-0	IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009
OSPL90	1600 Hz	129 dB SPL	120 dB SPL
	Pico	131 dB SPL	121 dB SPL
	Promedio	127 dB SPL	118 dB SPL
Salida acústica (Entrada 60 dB SPL)	1600 Hz	114 dB SPL	105 dB SPL
	Pico	117 dB SPL	107 dB SPL
	Promedio	108 dB SPL	101 dB SPL
Ganancia completa (Entrada 50 dB SPL, Modo de test ganancia max de Compass)	1600 Hz	65 dB	56 dB
	Pico	70 dB	65 dB
	Promedio	68 dB	59 dB
Salida de la bobina (Entrada 31,6 mA/m)	1600 Hz	114 dB SPL	105 dB SPL
	Pico	117 dB SPL	107 dB SPL
	Promedio	108 dB SPL	101 dB SPL
Rango de frecuencia		100 Hz - 6700 Hz	100 Hz - 6400 Hz
Distorsión armónica	500 Hz	<2%	<2%
	800 Hz	<2%	<2%
	1600 Hz	<2%	<2%
Ruido de entrada equivalente		20 dB SPL	22 dB SPL
Consumo de pila (en reposo)		1,00 mA	1,00 mA
Consumo de pila		1,05 mA	1,07 mA
Vida útil / horas de la pila (tipo 312 Zn-Air, 145 mAh)		140 (>115)	135 (>115)
Inmunidad a teléfonos móviles		IRIL: -34/-29/-30 dB SPL	U-rating: M4/T4